

Syrgasflaska LIV och sug på akutvagn

Kontroll

Kontrollera att manometer/tryckmätare:

- (1) visar på det gröna området. Om inte – byt flaskan! Syrgasslang ska vara ansluten till slangnippel
- (2) och en pocketmask ska vara ansluten till slangen. Öppna huvudkranen
- (3), vrid moturs till "OPEN". Se till att locket
- (4) på sugpåsen är fastsatt på kanistern och att slangarna är rätt kopplade. Starta ejektorsugen genom att lyfta reglaget
- (5) och kontrollera att sugpåsen expanderar genom att vrida den svarta ratten
- (7). Blockera sug(patient)slangen och ställ in sugtrycket
- (8) på -0,10 bar/-10 kPa (startläge). Stäng av sugen genom att trycka ned reglaget. Stäng huvudkranen
- (3) vrid medurs till "CLOSE". Släpp ut trycket i systemet genom att vrida på O2 flödesväljarens ratt
- (6) och när gasflödet upphört, vrid O2 flödesväljarens ratt till läge 0.

Syrgasbehandling


Gäller:

- Öppna huvudkranen (3), vrid moturs till "OPEN".
- Ställ in ordinerat flöde genom att vrida på O2 flödesväljarens ratt (6).

Sugbehandling

Gäller:

- Öppna huvudkranen (3), vrid moturs till "OPEN".
- Starta ejektorsugen genom att lyfta reglaget (5)
- Startläge -0,10 bar/-10 kPa rekommenderas. Sugtrycket (8)

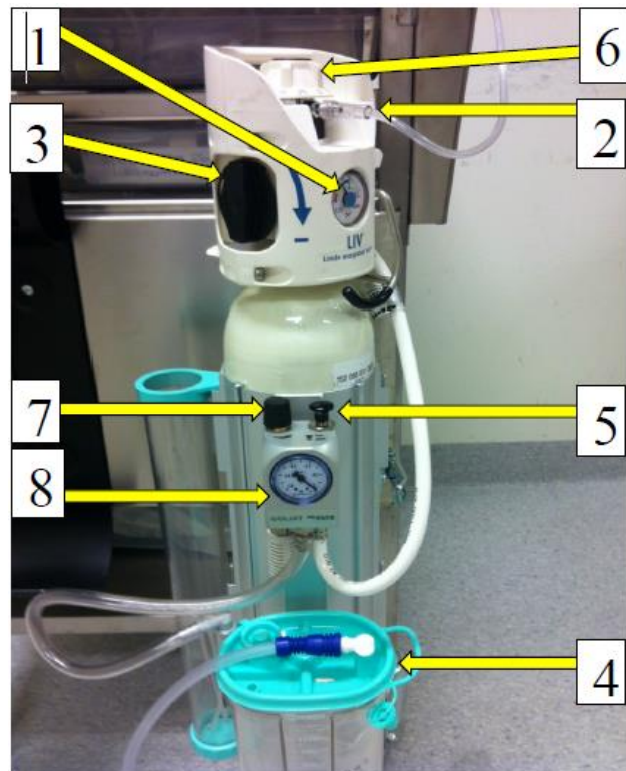

regleras genom att vrida den svarta ratten (7).

- Stäng av sugen när den inte används genom att trycka ned reglaget.

Efter varje användning

Gäller:

- Anslut en ny syrgasslang och en ren samt komplett pocketmask.
- Anslut rena sugtillbehör (engångs).
- UTFÖR KONTROLL, se ovan.

För beställning av syrgasflaska – ring Transport ordcentral 190 00, välj #4 Gastransporter

Dokumenthistorik

2024-06-19 Vilhelm Arvhult. Dokumentet har tillgänglighetsanpassats.

2025-01-22 Federico Centurion Arce Ingen ändring